


# Container Tumbler with Chopper

攪拌羽根付  
コンテナタンブラー

コンテナタンブラー本体にモーターを取付けコンテナには取外式攪拌羽根付上蓋をセットします。

コンテナクランプ時にモーター側と上蓋側が接続されコンテナを回転混合しながらコンテナ内部では粉体を攪拌します。

- 上蓋に攪拌羽根が取付いているので攪拌羽根の洗浄が容易です。
- ご要望のコンテナに合わせて設計致します。(100L~2000L)
- 液体添加付きタイプもあります。(特許申請中)

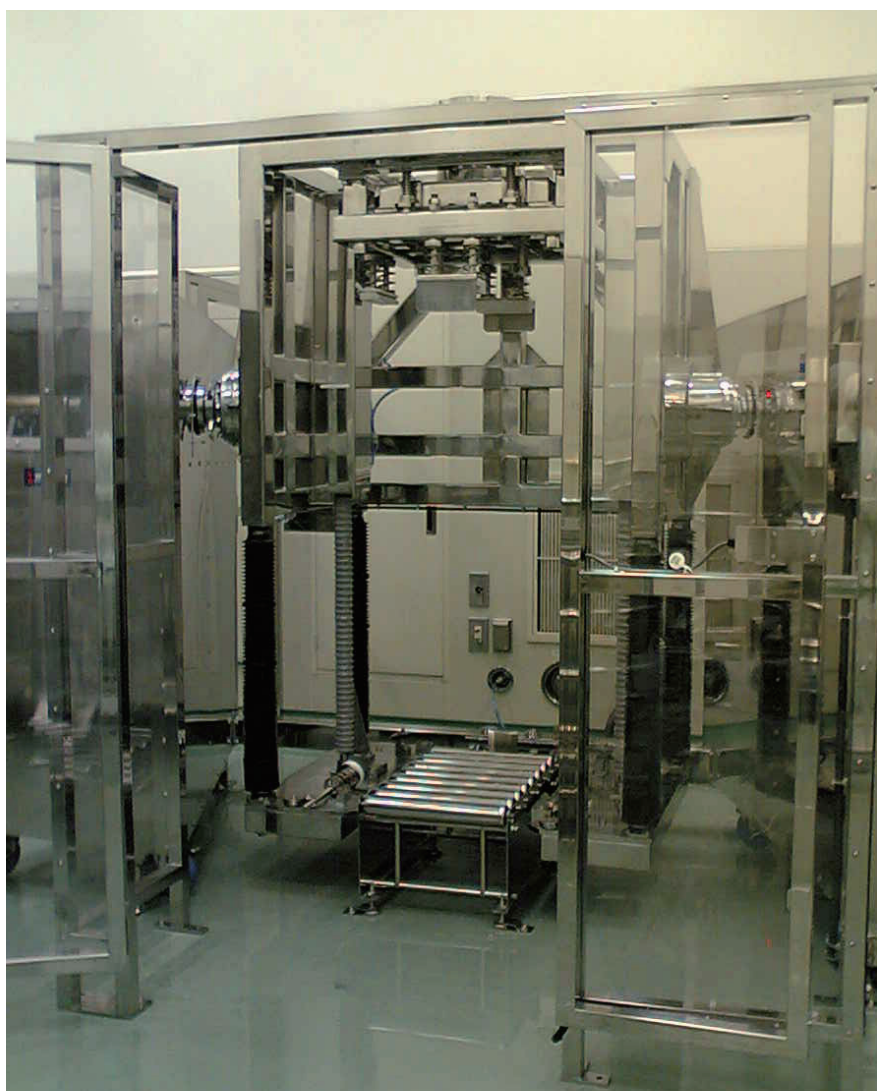



5L液体タンク



45L液体タンク



チョッパー蓋




チョッパー蓋脱着装置




液体添加用チョッパー羽根

# Container Tumbler with Chopper


攪拌羽根付  
コンテナタンブラー

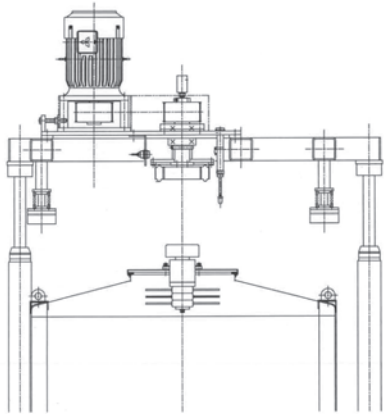

コンテナ アンクランプ  
チョッパー アンクランプ

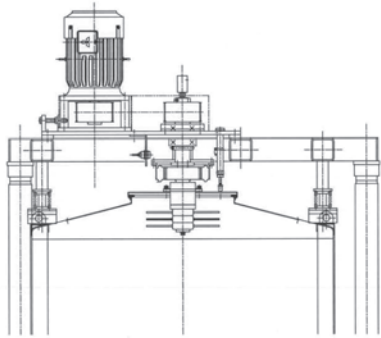

コンテナ クランプ  
チョッパー クランプ

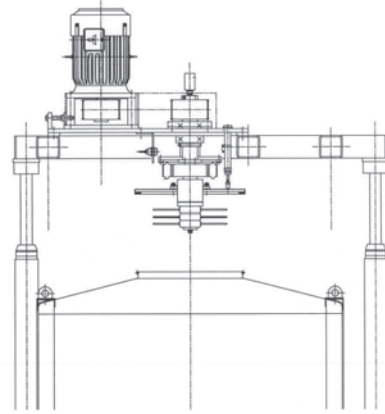

コンテナ アンクランプ  
チョッパー クランプ